

Flexi Trays

Nosiče na bělení zubů



www.DrMartinSchwarz.com/FT/

Sada Flexi Trays Dr. Martin Schwarz obsahuje: 2 nosiče, pouzdro

Flexi Trays


Flexi Trays Dr. Martin Schwarz je sada teplem smrštitelných nosičů na zuby určených pro samostatné nanášení přípravků řady Oral Care na povrch zubů. Tvar nosičů lze snadno přizpůsobit zubům díky jejich termoplastickým vlastnostem. Po správném přizpůsobení nosičů zubním obloukům uživatele je do nosičů nanesen dentální gel a poté jsou nosiče nasazeny na zuby na dobu určenou v návodu k použití gelu. Protože se indikace a způsob použití jednotlivých dentálních gelů liší, měly by se teplem smrštitelné nosiče Flexi Trays používat podle návodu gelu aplikovaného na nosiče.

Výrobek je určen zejména pro:

- nanášení bělicích přípravků na povrch zubů
- používání znečistlivujících gelů proti přecitlivělosti dásní
- nanášení antibakteriálních dentálních gelů
- nanášení jiných přípravků určených pro použití na zubech

Způsob použití výrobku:

1. Před nasazením nosičů Flexi Trays Dr. Martin Schwarz s dentálním gelem přizpůsobte nosiče tvaru zubních oblouků.
2. Nasadte nosiče na zuby a jemně skousněte, abyste určili, nakolik bude potřeba upravit jejich tvar.
3. Ponořte jeden nosič Flexi Trays na 5–8 sekund do čerstvě převařené vody.
4. Nosič držte za úchyty a zanořte jej do vody s teplotou cca 80 °C. Dávejte pozor, abyste nepřekročili doporučenou dobu 5–8 sekund. Pokud bude nosič ponořen ve vodě déle, může dojít k jeho roztavení nebo poškození.
5. Když nosič vlivem teploty změkne, ujistěte se, že se obě strany nosiče nedotýkají.
6. Po uplynutí doporučené doby vyjměte nosič z vody, pomocí prstu zkontrolujte, zda není příliš teplý a bezpečně jej umístěte v ústech, na jednom ze zubních oblouků. Ujistěte se, že nosič správně zakrývá zuby a poté pomocí prstů z obou stran přitlačte nosič na zuby. Při tom z něj vysajte vzduch a po dobu několika sekund jej držte co nejblíže zubům – to vám umožní co nejlepší přizpůsobení dle tvaru zubů.
7. Vyjměte nosič z úst a oceňte výsledek. Pokud není nosič dostatečně přizpůsoben zubům, postup ještě jednou zopakujte. Pamatujte, že ponoření nosiče do horké vody na příliš dlouhou dobu jej může poškodit.
8. Po obdržení tvaru, který odpovídá vašim zubům, vložte nosič do ledové vody, aby se jeho tvar zafixoval.
9. Pro zvýšení pohodlí během nošení odstříhnete přebytečnou část nosiče, např. jeho úchyt.
10. Stejně postupujte s druhým nosičem a přizpůsobte jej druhému zubnímu oblouku.
11. Na nosiče naneste dentální přípravek Flexi Trays Dr. Martin Schwarz a nasadte je do úst dle návodu k použití dentálního gelu.

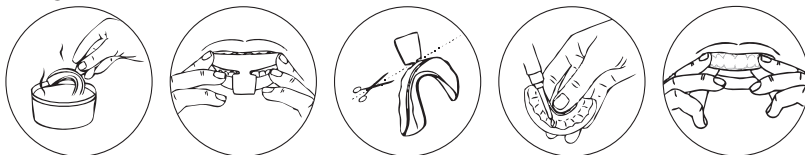

Výrobek nepoužívejte, pokud:

- jste alergičtí na některou ze složek obsažených ve výrobku
- je aplikace nosičů nepohodlná nebo bolestivá
- velikost výrobku nesedí vašim čelistem

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte mimo zdroj tepla, jisker a plamenů. Skladujte na chladném místě v původním obalu. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Po každém použití důkladně vyčistěte. Všechny součásti sady musí být čisté a suché. Nepoužívejte, pokud je jakákoliv součást sady poškozená. Sada musí být používána v souladu s doporučeními a k účelu, pro který byla určena.

INTERAKCE

Výrobek se vyznačuje vysokou stabilitou. Za normálních podmínek skladování a používání výrobek neinteraguje. Vyvarujte se vystavení výrobku zdrojům tepla, plamenům a dodržujte doporučené podmínky použití.

Údaje o odpovědné osobě:

LDK GmbH
Im Technologiepark 1
Frankfurt Oder, 15236

Info@DrMartinSchwarz.com

DR. MARTIN SCHWARZ